

Здорові ясна та зуби протягом всього життя

Щоденна гігієна
міжзубних проміжків
для здоров'я ясен
і повноцінної гігієни
ротової порожнини




interprox.

DENTAID
Oral health. Better life.

Кожен зуб має 5 відкритих поверхонь

ТРИ З П'ЯТИ ПОВЕРХОНЬ МОЖНА ОЧИСТИТИ ЗУБНОЮ ЩІТКОЮ,
АЛЕ ДВІ ІНШІ ПОВЕРХНІ НЕ ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗУБНОЇ ЩІТКИ

Фронтальну, язичну та жувальну поверхні можна очистити зубною щіткою

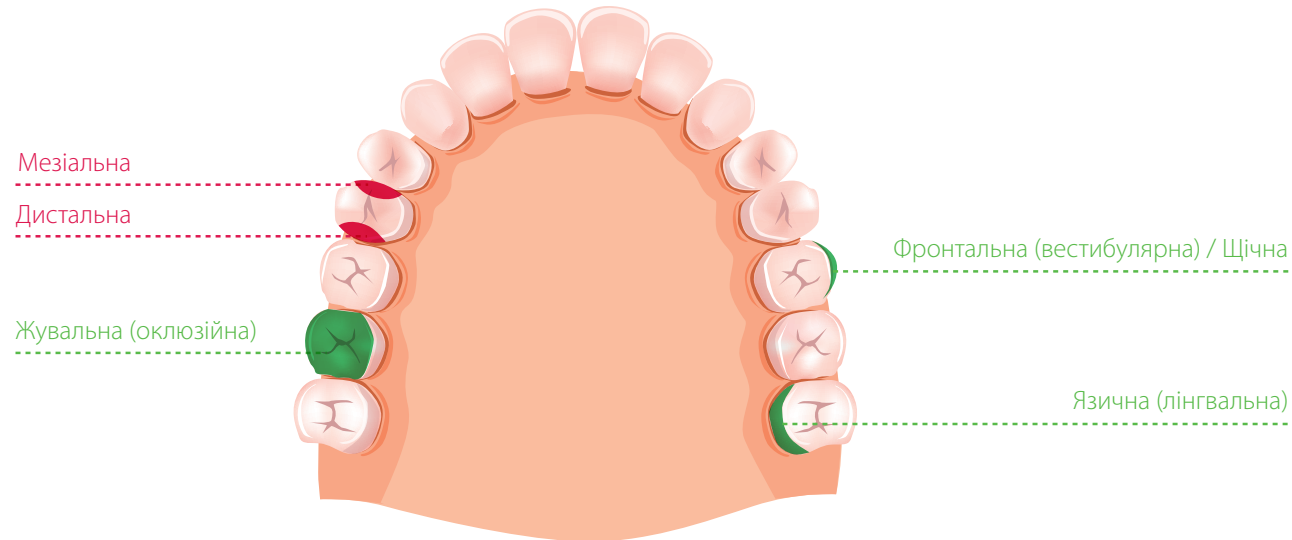

Саме тому, якщо ви не користуєтеся засобами для чищення міжзубних проміжків,
ви не чистите зуби на 100% ефективно



60%

ЧИЩЕННЯ ЗУБІВ ЩІТКОЮ

Зубна щітка є основою нашої щоденної гігієни порожнини рота, але вона очищує лише 60% поверхні зуба



40%

ЧИЩЕННЯ МІЖЗУБНИХ ПРОМІЖКІВ

У міжзубних проміжках накопичується бактеріальний наліт, що спричиняє основні проблеми порожнини рота: карієс, гінгівіт, неприємний запах з рота

Потрібно постійно підвищувати обізнаність про важливість та переваги догляду за міжзубними проміжками



Гінгівіт

50%

населення страждає
на гінгівіт

Carasol M, Llodra JC, Fernández-Meseguer A, Bravo M, García-Margallo MT, Calvo-Bonacho E, Sanz M, Herrera D. Periodontal conditions among employed adults in Spain. J Clin Periodontol. 2016 Jul;43(7):548-56.

Карасоль М., Ллодра Х.К., Фернандес-Месегер А., Браво М., Гарсія-Маргалло М.Т., Кальво-Боначо Е., Санс М., Еррера Д. Стан захворювань пародонту серед працюючого дорослого населення в Іспанії. Журнал клінічної пародонтології. 2016 Липень; 43(7):548-56.



Дентальні імпланти

4 з 5

людей з імплантами мають
періімплантатний мукозит

6th European Workshop (Lang 2008): 80% of people who have implants placed have peri-implant mucositis.

6-й Європейський семінар (Ланг 2008): 80% людей, яким встановлено зубні імпланти, страждають на періімплантатний мукозит.



Карієс

78%

випадків карієсу починається
з міжзубних проміжків

Demirci M., Tuncer S., Yuceokur AA. Prevalence of caries on individual tooth surfaces and its distribution by age (between 17 and 25 years) and gender university clinic patients. Eur J Dent. 2010 Jul; 4(3): 270-9.

Демірчі М., Тунцер С., Ючеокур А.А. Розповсюдження карієсу на окремих поверхнях зубів та його поширення залежно від віку (між 17 та 25 роками) та статі – дослідження проводилося на пацієнтах клініки при університеті. Європейський журнал стоматології, 2010 Липень; 4(3): 270-9.



Галітоз

60%

випадків галітозу (неприємного запаху
з рота) спричинені накопиченням
бактеріального нальоту
в міжзубних проміжках

Roldán S, Serrano J, Herrera D. Halitosis guide, concepts and clinical management. SEPA.

Ролдан С., Сerrano Х., Еррера Д. Довідник з галітозу та клінічного ведення пацієнта за даними SEPA.

Який засіб для догляду за міжзубними проміжками мені слід вибрати?
Це залежить від міжзубного проміжку



Закриті проміжки


Ясна повністю закривають
міжзубний проміжок



Відкриті проміжки

Ясна не повністю закривають
міжзубний проміжок

У мене відкриті міжзубні проміжки, який засіб краще обрати?
Міжзубну щітку чи нитку?

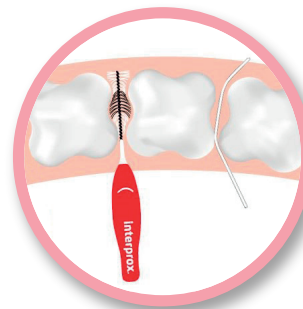

Міжзубні щітки рекомендуються
як найкращий вибір за більшості умов,
оскільки вони є найефективнішим засобом

Використання міжзубних щіток зменшує





**КРОВОТОЧИВІСТЬ
ЯСЕН НА
-47%**
через один тиждень
використання



**КРОВОТОЧИВІСТЬ
ЯСЕН НА
-85%**
через три місяці
використання

Bourgeois, D., Bravo, M., Llodra, J. C., Inquimbert, C., Viennot, S., Dussart, C., & Carrouel, F. (2019). Calibrated interdental brushing for the prevention of periodontal pathogens infection in young adults - a randomized controlled clinical trial. Scientific reports, 9(1), 15127. / Буржуа Д., Браво М., Ллодра Х.К., Інквімберт К., Вієннот С., Дуссарт К., Карруель Ф. (2019). Каліброване чищення міжзубних проміжків для профілактики інфікування патогенними мікроорганізмами пародонту у молодих людей - рандомізоване контрольоване клінічне дослідження. Наукові доповіді, 9(1), 15127.

Міжзубні щітки INTERPROX® (ІНТЕРПРОКС) можуть знищити 100 млн бактерій трьома рухами

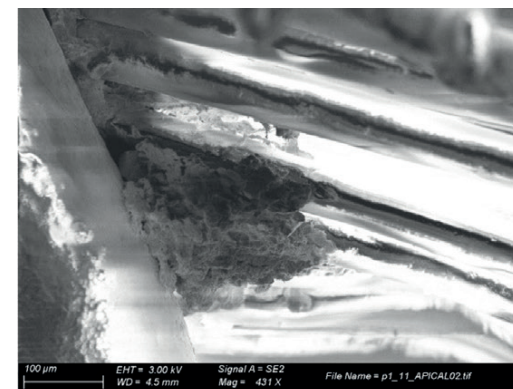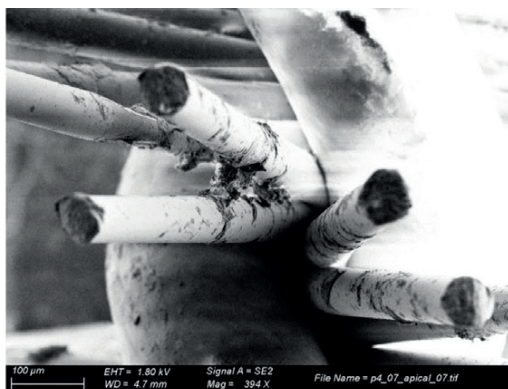

Зображення сканувальної електронної мікроскопії (SEM) голівок міжзубних щіток Interprox після використання.



**МІЖЗУБНІ ЩІТКИ INTERPROX®
знищують бактерії, які викликають
проблеми з яснами¹**



**МІЖЗУБНІ ЩІТКИ INTERPROX®
здатні знищити до 100 000 000 бактерій
трьома рухами вперед-назад²**



**МІЖЗУБНІ ЩІТКИ INTERPROX®
видаляють більшу частину бактеріального
нальоту, що допомагає зберегти ясна здоровими**

1. Bourgeois, D., Bravo, M., Llodra, J. C., Inquimbert, C., Viennot, S., Dussart, C., & Carrouel, F. (2019). Calibrated interdental brushing for the prevention of periodontal pathogens infection in young adults - a randomized controlled clinical trial. Scientific reports, 9(1), 15127. 2. In vitro study of the dragging effect of interdental biofilm with Interprox® interdental brushes. / 1. Буржуа Д., Браво М., Ллодра Х.К., Інквімберт К., Вієннот С., Дуссарт К., Карруель Ф. (2019). Каліброване чищення міжзубних проміжків для профілактики інфікування патогенними мікроорганізмами пародонту у молодих людей - рандомізоване контрольоване клінічне дослідження. Наукові доповіді, 9(1), 15127. 2. Дослідження in vitro відшарування біоплівки в міжзубних проміжках за допомогою міжзубних щіток Interprox®.

Пацієнти з пародонтитом та периімплантитом – не єдина група населення, якій рекомендується використовувати міжзубні щітки



Гінгівіт



Видаляють наліт, запобігаючи запаленню ясен.

Очищують зубний наліт біля лінії ясен, допомагаючи в лікуванні захворювання.



Зменшують кровоточивість, сприяючи підтримці здоров'я ясен.
Запобігають подальшому прогресуванню пародонтиту.



Ортодонтичні конструкції



Очищають важкодоступні місця навколо брекетів, покращуючи гігієну ротової порожнини.



Знижують ризик розвитку карієсу і проблем з яснами під час лікування.



Дентальні імпланти



Ефективно очищають наліт навколо імплантатів, запобігаючи виникненню периімплантиту.



Забезпечують здоров'я тканин навколо імплантату, зменшують кількість ускладнень.



Дентальні коронки та мости



Добре очищають наліт навколо ортопедичних конструкцій, забезпечуючи їх довговічність.



Продовжують термін служби ортопедичних конструкцій.



Карієс та ерозія емалі



Видаляють наліт, зменшуючи ризик розвитку карієсу.



Дозволяють підтримувати загальне здоров'я ротової порожнини, запобігають виникненню карієсу.



Галітоз



Знищують бактерії, що викликають неприємний запах з рота.



Дозволяють підтримувати свіжість подиху, зменшуючи бактеріальне навантаження.

Адаптація до анатомії ротової порожнини: циліндрична форма забезпечує точність чищення, а конічна – досягнення важкодоступних місць



Циліндрична

форма, використовується для щіток малого розміру, що забезпечує оптимальну **ТОЧНІСТЬ** чищення у вузьких міжзубних проміжках.

nano нано
super micro супер мікро
micro мікро
mini міні



Конічна

форма, використовується для щіток середнього та великого розміру, що забезпечує кращу **ДОСТУПНІСТЬ**, додатковий захист та зменшення надлишкового тиску під час введення у ширші міжзубні проміжки.

conical конікал
super conical супер конікал
maxi conical максі конікал
x-maxi conical x-максі конікал
xx-maxi conical xx-максі конікал




Циліндрична форма щіток великого розміру дещо ускладнює перші міліметри введення в міжзубний проміжок. На початку введення створюється надлишковий тиск, який може спричинити пошкодження м'яких тканин ротової порожнини.

Правильний вибір розміру щітки дуже важливий для видалення бактеріального нальоту без пошкодження тканин ротової порожнини.

Ефективність доведено спеціалістами зі здоров'я ротової порожнини за результатами досліджень Гайдельберзького університету

INTERPROX® робить процедуру чищення легкою для вас

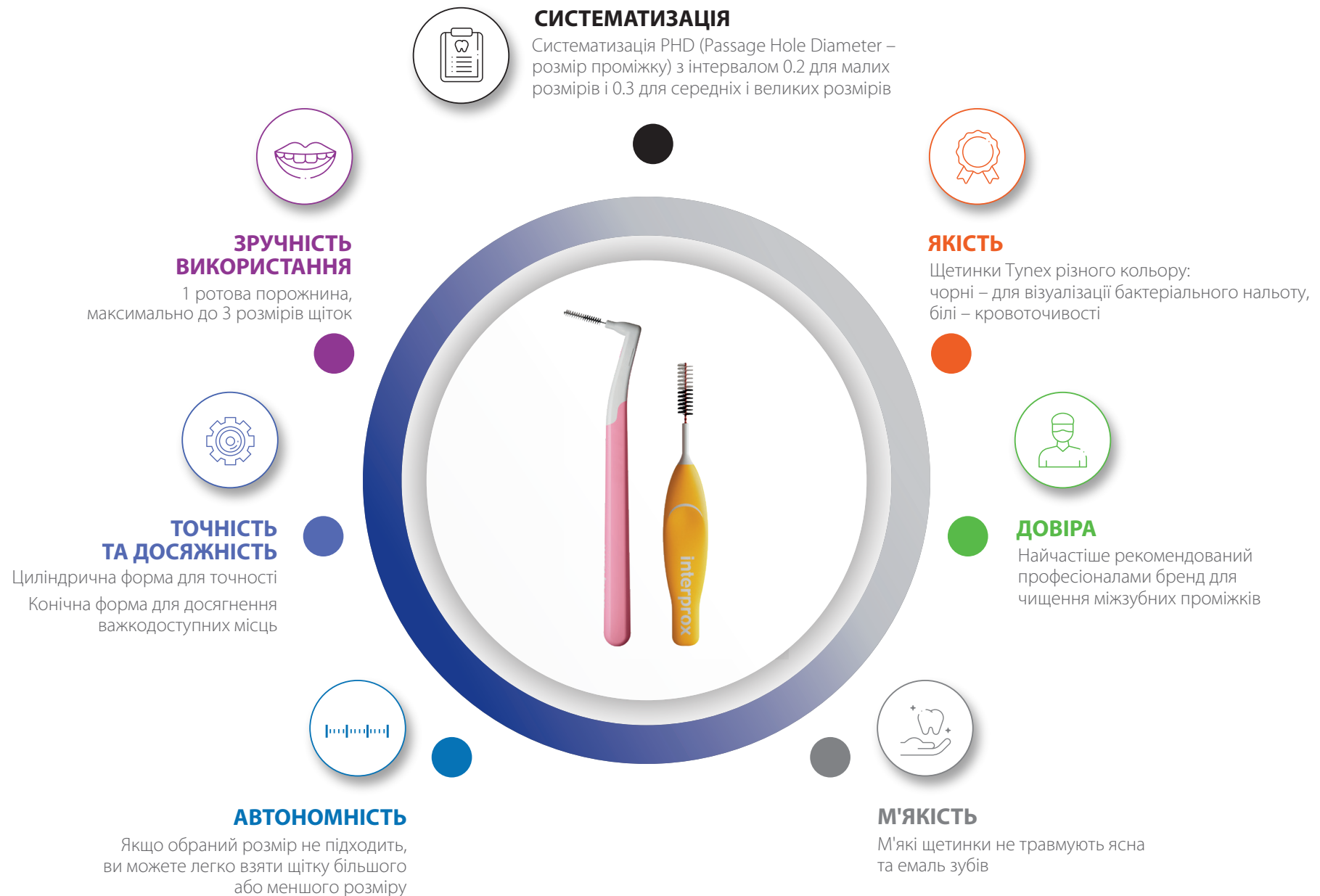

Міжзубні щітки **INTERPROX®** роблять процедуру чищення легкою для вас:
якщо обраний розмір не підходить, ви можете легко взяти щітку більшого
або меншого розміру

Interprox Plus

Інтерпрокс Плюс

МАЛІ РОЗМІРИ



•
nano
нано

•
super micro
супер мікро

•
micro
мікро

0.7 > 2 mm <
0.9 > 2 mm <
1.1

СЕРЕДНІ РОЗМІРИ



•
mini
міні

•
conical
конікал

•
super conical
супер конікал

1.4 > 3 mm <
1.7 > 3 mm <
2.0

ВЕЛИКІ РОЗМІРИ



•
maxi conical
максі конікал

•
x-maxi conical
х-максі конікал

•
xx-maxi conical
хх-максі конікал

2.3 > 3 mm <
2.6 > 3 mm <
2.9

Міжзубні щітки **INTERPROX®** роблять процедуру чищення легкою для вас:
якщо обраний розмір не підходить, ви можете легко взяти щітку більшого
або меншого розміру

Interprox 4G

Інтерпрокс 4Джи

МАЛІ РОЗМІРИ



•
nano
нано

0.7

> 2 mm <



•
super micro
супер мікро

0.9

> 2 mm <



•
micro
мікро

1.1

СЕРЕДНІ РОЗМІРИ



•
mini
міні

1.4

> 3 mm <



•
conical
конікал

1.7

> 3 mm <



•
super
conical
супер конікал

2.0

ВЕЛИКІ РОЗМІРИ



•
maxi
conical
максі конікал

2.3

5 головних правил для вибору щітки INTERPROX®

1

Виберіть такий розмір міжзубної щітки, щоб вона проходила між зубами з помірним зусиллям.

2

Акуратно введіть щітку трохи під кутом між яснами та зубами. Обережно рухайте її вперед і назад, щоб очистити міжзубний простір. При регулярному застосуванні користуватися міжзубною щіткою стає значно легше.

3

Переконайтеся, що дріт щітки залишається прямим, коли ви вводите щітку в міжзубний проміжок. Якщо дріт згинається, замініть щітку.

4

При правильному та регулярному використанні міжзубної щітки кровоточивість ясен не повинна виникати.

5

В результаті регулярного використання щетинки міжзубної щітки переважно мають бути чистими, без крові та без нальоту. Частинки зубного нальоту не повинні залишатися на дротяній основі.

Міжзубні щітки **interprox**®



Interprox Plus

- ☐ Nano
- ☐ Super Micro
- ☐ Micro
- ☐ Mini
- ☐ Conical
- ☐ Super Conical
- ☐ Maxi Conical

PHD*

- 0.7 Нано
- 0.9 Супер Мікро
- 1.1 Мікро
- 1.4 Міні
- 1.7 Конікал
- 2.0 Супер Конікал
- 2.3 Максі Конікал



Interprox 4G

- ☐ Nano
- ☐ Super Micro
- ☐ Micro
- ☐ Mini
- ☐ Conical
- ☐ Super Conical
- ☐ Maxi Conical

PHD*

- 0.7 Нано
- 0.9 Супер Мікро
- 1.1 Мікро
- 1.4 Міні
- 1.7 Конікал
- 2.0 Супер Конікал
- 2.3 Максі Конікал



- ☐ Гель INTERPROX для чищення міжзубних проміжків, 20 мл

*PHD (Passage Hole Diameter) – розмір проміжку.

Ваш менеджер / продавець:



dentaid.ua

