



... по-справжньому індивідуальний штифт  
з ідеальним припасуванням

## everStick®POST

від компанії GC

Скловолоконні штифти,  
яким можна надати дійсно  
індивідуальну форму

**GC**



# everStick®POST

- негайне рішення для  
неперевершеної адаптації та міцності



Ви шукаєте штифт, який забезпечить максимальну підтримку коронки? everStickPOST є унікальним штифтом, що виготовляється з просочених волокон, які можуть **адаптуватись до форми будь-якого кореневого каналу та дозволяють уникати надмірного препарування**. Він є м'яким та гнучким перед полімеризацією, і йому можна надати будь-якої бажаної форми, що повторює форму каналу. Таким чином, він **особливо показаний для кривих, овальних та великих корневих каналів**. Після полімеризації світлом він набуває еластичності, подібної до еластичності дентину, що забезпечує рівномірний розподіл оклюзійного навантаження та зменшення ризику перелому кореня.

Адаптивний

Потужна підтримка  
реставрації коронкової  
частини

По-справжньому  
індивідуальний



Dr. Dvornikova, Postia

## Які переваги є у everStickPOST порівняно з традиційними стандартними штифтами?



Можливість **надати форму коронковій частині**: забезпечує **оптимальну підтримку** коронки



**Мінімальне препарування каналу**: зменшує ризик **перфорації кореня**



**Унікальна структура IPN**: забезпечує **більшу силу адгезії** до композиту, з якого побудована кулка, та фіксуючого цементу, а також зменшує **ризик мікропідтікань**



Має унікальну запатентовану структуру IPN\*...



... для **неперевершеної мікромеханічної та хімічної адгезії волокон до композитних матеріалів**.

\* Interpenetrating Polymer Network (взаємопроникна полімерна сітка). Ця технологія базується на здатності полімерної матриці (PMMA та bis-GMA) частково розчинятись у смоли, яка застосовується для бондингу, що підвищує міцність всієї реставрації

# Мінімально інвазивне препарування кореневого каналу та максимальна підтримка коронки



Початкова ситуація



Видалення старої реставрації та препарування



Відпрепаруйте місце для штифта на 2/3 довжини каналу та промийте канал



Витягніть штифт з упаковки та відріжте бажану довжину



Приміряйте штифт та надайте йому форму в коронковій частині пінцетом



Введіть додаткові штифти, щоб заповнити місце, що залишається, та ущільніть їх латерально



Витягніть індивідуалізований штифт, не полімеризуючи світлом



Внесіть Gradia Core Bonding у канал, висушіть та заполімеризуйте світлом



Нанесіть Gradia Core у якості фіксуючого цементу



Помістіть штифт та виконайте преполімеризацію («прихватіть світлом»)



Продовжіть побудову куки



Остаточний вигляд після нанесення шару композиту G-aenial Anterior

# Шлях до успіху...

... для створення **максимальної підтримки** коронки через пломбування кореневого каналу **тільки волокнами**



Встановіть кофердам та відпрепаруйте місце для штифта




Відміряйте потрібну довжину. Виберіть діаметр, що підходить найбільше, та вкоротіть штифт ножицями



Перевірте припасовку штифта всередині кореневого каналу



Загостріть штифт у разі необхідності

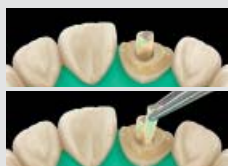

Помістіть штифт в кореневий канал. Заповніть канал коротшими штифтами у разі потреби



Внесіть композитний цемент подвійного затвердіння у кореневий канал та встановіть ущільнений штифт



Полімерізуйте штифт світлом штифт протягом мінімум 40 секунд



Побудуйте композитну кукусу або виконайте реставрацію

## Упаковки



900846 everStickPOST Intro  
900847 everStickPOST 0.9 (окремо штифти)  
900848 everStickPOST 1.2 (окремо штифти)  
900849 everStickPOST 1.5 (окремо штифти)

## Супутні продукти



GC Gradia® Core



GC G-CEM LinkAce®

### everStickPOST

Форма	однаправлений пучок світлопровідних скловолокон
Діаметр	0,9, 1,2 або 1,5 мм
Кількість волокон	~1600, 2000 або 4000 окремих скловолокон на пучок

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

### GC EUROPE N.V.

GC EEO  
Siget 19b  
HR-10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474  
Fax.+385.1.46.78.473  
info@eoo.gceurope.com  
http://www.eoo.gceurope.com

### Офіційний дистриб'ютор

компанії GC в Україні:  
Група компаній «КРИСТАР»  
04071, м. Київ,  
вул. Межигірська, 50, оф.1  
Тел./факс: (044) 463.63.37  
(044) 463.62.66

info@kristar.ua  
http://www.kristar.ua

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, а також лікарів та інших професійних медичних працівників

