

everX Flow™

Текучий композит для заміщення дентину,
підсилений короткими волокнами

Потужна серцевина



everX Flow від GC

Потужна серцевина


Відкрийте для себе **everX Flow** – текучий композит, підсилений короткими волокнами, розроблений для **заміщення дентину та підсилення реставрації**. Наслідуючи принцип металевої арматури у бетонних конструкціях, скловолокна в everX Flow таким самим чином зміцнюють реставрацію та **запобігають її розтріскуванню**.

Завдяки легкому внесенню, двом відтінкам та неймовірним механічним якимостям everX Flow стане **вашим надійним помічником для усіх реставрацій, які потребують міцної серцевини, а також побудови кукси**.



Неперевершена міцність на розтріскування для довговічних великих реставрацій

Більшість композитів пропонують ідеальні характеристики для заміщення емалі: високу зносостійкість та естетичність. Проте вони не схожі на дентин, коли мова йде про стійкість до розтріскування. everX Flow долає цю проблему, маючи **відмінну міцність на розтріскування, яка близька до міцності дентину**. Це досягається завдяки високій кількості коротких волокон, які міцно приєднані до матриці смоли. Матеріал **ефективно підсилює великі реставрації**, поєднуючись з традиційним композитом у якості шару емалі.

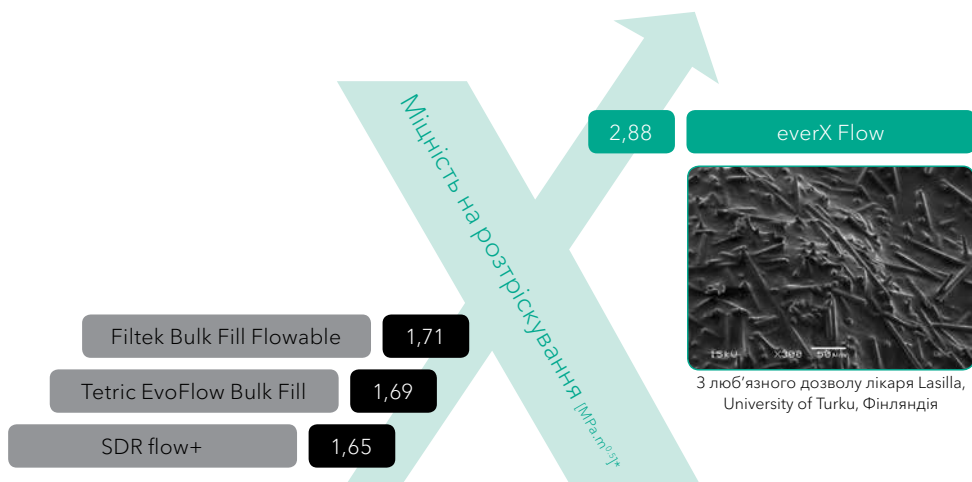

*Джерело: GCC R&D - Файл даних.
Тест виконано за стандартом ASTM E399-90 (1997).


Ідеальна тиксотропність для легкого внесення та відмінної адаптації



Завдяки оптимальній тиксотропності everX Flow легко **адаптується до будь-якої порожнини** та допомагає **уникнути пор.** Його контрольоване розподілення також дозволяє вносити його у верхні моляри **без стікання.**



З люб'язного дозволу лікаря Javier Tapia Guadix, Іспанія

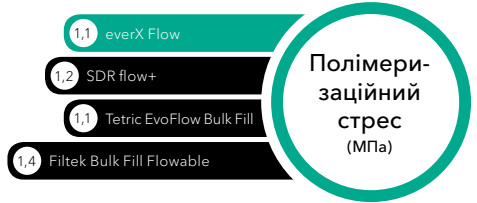

Джерело: GCC R&D - Інформація в файлі

Два відтинки, щоб задовольнити усі ваші потреби

Відтінок Bulk

Глибина полімеризації 5,5 мм

Оптимальний для **глибоких порожнин жувальних зубів**

Відтінок Dentin

Глибина полімеризації 2,0 мм

Оптимальний для **естетичних результатів та побудови кукси**

Оптимальний для підсилення реставрацій великих порожнин та досягнення естетичних результатів



Підготовка порожнини



Внесення everX Flow (відтінок Dentin)



Фінішний шар Essentia (відтінок Universal)



Кінцевий результат

З люб'язного дозволу лікаря Georg Benjamin, Німеччина



Підготовка порожнини



Внесення everX Flow (відтінок Bulk)



Фінішний шар G-aenial Universal Injectable (відтінок A3)



Кінцевий результат

З люб'язного дозволу лікаря Lucile Dahan, Франція

everX Flow від GC

Потужна серцевина



Відтінок Bulk
для глибоких порожнин

Відтінок Dentin
для високо-естетичних результатів



Препарування порожнини



У випадку порожнини II Класу відновить відсутні стінки традиційним композитом



Заповнить порожнину за допомогою everX Flow



Фінальний результат після покриття традиційним композитом

everX Flow

10001490	everX Flow, шприц 2 мл (3.7 г) Bulk EEP
10001491	everX Flow, шприц 2 мл (3.7 г) Dentin EEP

Також дізнайтеся про



G-Premio BOND
Універсальний адгезив



G-aenial Universal Injectable
Високоміцний текучий композит



Essentia Universal
Універсальний пакувальний композит

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND та G-aenial Universal Injectable є торговими марками GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ та Tetric EvoFlow Bulk Fill не є торговими марками GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/uk-UA>

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua