

Компания *Sure Dent* – 40 лет на мировом рынке!

Гуттаперчевые и бумажные штифты
Паста на основе гидроокиси кальция
Гель для расширения корневых каналов
Ретракционные нити



Sure-endo

Гуттаперчевые и Бумажные штифты

Идеальный выбор при лечении корневых каналов




Гуттаперчевые штифты



- 6% / 0.06
- 4% / 0.04
- ISO 2% / 0.02

0.04

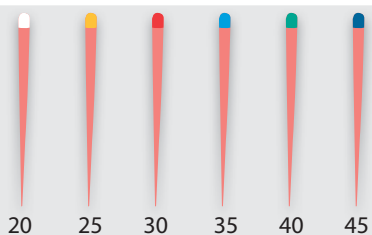

Штифты гуттаперчевые для постоянного пломбирования корневых каналов


Упаковка:

- штифты стандартных размеров 120 шт.
- штифты нестандартных размеров для Profile 60 шт.


Размеры:

- штифты стандартных размеров: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90
ассорти: 15-40, 45-80, 90-140
- штифты нестандартных размеров для Profile (конусность .04, .06): 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ассорти: 20-45

Бумажные штифты

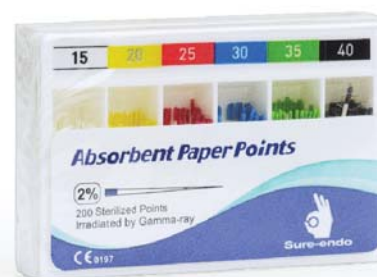

0.06

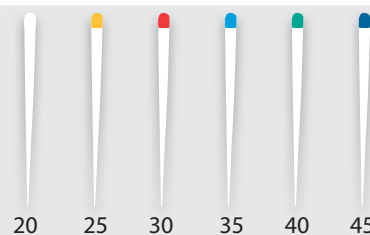

Штифты бумажные для просушивания корневых каналов при проведении эндодонтических процедур

Упаковка:

- штифты стандартных размеров 200 шт.
- штифты нестандартных размеров для Profile 100 шт.

Размеры:

- штифты стандартных размеров: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, ассорти: 15-40, 45-80, 90-140
- штифты нестандартных размеров для Profile (конусность .04, .06): 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ассорти: 20-45

SURE-Paste®

Паста на основе гидроксида кальция



Показания:

- Лечение инфицированных корневых каналов
- Временное пломбирование корневых каналов
- Лечение канала после экстирпации пульпы
- Временная прокладка для перекрытия обнаженной пульпы
- Апексификация

Преимущества:

- Отличная рентгеноконтрастность и пролонгированный антибактериальный и бактерицидный эффект
- Легко достигает апекса
- Легкость очистки и удаления из каналов благодаря растворимости в воде

Упаковка:

- Стандартный набор (1 шприц 2 г, 20 одноразовых насадок)

Свойства:

- Стабильная консистенция без загустевания или разделения на фракции
- Готовая паста оптимальной консистенции
- Гибкие насадки удобны для работы даже в искривленных корневых каналах
- Гигиеничная упаковка

SURE-Prep®

Гель синего цвета на основе ЭДТА для химико-механического расширения корневых каналов



Свойства и преимущества:

- Гель SURE-Prep® на основе этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) обеспечивает эффективную очистку корневого канала и облегчает его препарирование
- Пероксид карбамида, который содержится в препарате, вступая в реакцию с гипохлоритом натрия, способствует пенообразованию и, тем самым, удалению остатков пульповой ткани и дентинных опилок из канала
- Открывая дентинные каналы, гель облегчает проникновение в них эндодонтических медикаментов и силеров
- Удаление геля перед obturацией канала легко контролировать благодаря его консистенции и синему цвету
- Гель выполняет роль смазки и облегчает инструментальную обработку корневого канала

Упаковка:

- 3 шприца по 6 г, 20 одноразовых насадок
- Отдельно: шприц 6 г, 6 одноразовых насадок

Действующие вещества:

- 15% этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА)
- 10% пероксида карбамида в полипропиленгликолевых и полиэтиленгликолевых сополимерах


SURE-Cord®

Вязаная ретракционная нить с обрезчиком



Преимущества вязаной ретракционной нити:

- Нить изготовлена из 100% хлопка
- Вязаные петли, которые переплетаются между собой, способны поглощать значительно большее количество гемостатического раствора, а также служат отличным средством доставки в операционное поле препаратов в форме геля
- Обладает большей абсорбирующей способностью, чем крученые или плетеные нити
- Во время препарирования вязаная нить не наматывается на алмазный бор
- Нить идеально подходит для ретракции тканей десны и легко пакуется в зубодесневую бороздку

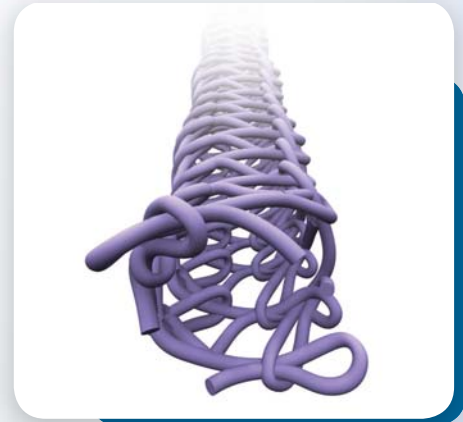

Обрезчик нити:



- Легкий и удобный способ отрезания нити
- Лезвие из нержавеющей стали находится внутри колпачка
- Отрезает нить автоматически при закрытии контейнера колпачком
- Удерживает конец нити в колпачке, благодаря чему она не падает вовнутрь контейнера после отрезания
- Предотвращает перекрестное инфицирование



6 размеров: 000, 00, 0, 1, 2, 3:

- Благодаря цветовой маркировке можно быстро и легко выбрать подходящие нити
- Длина нити в каждой бутылочке-контейнере – 254 см
- Нить непропитанная

КРИСТАР
Группа компаний

04071, г. Киев,
ул. Межигорская, 50, оф. 1

Тел/факс: (044) 463.63.37
(044) 463.62.66

info@kristar.ua
www.kristar.ua

Специализированное издание, предназначенное для медицинских учреждений, врачей и других профессиональных медицинских работников.