

Технологія СклоГібриду виведена на новий рівень

Ідеальне рішення для заміни дефектних амальгамних реставрацій

Матеріал легко вносити, пакувати та контурувати. Для виконання реставрації вистачить 3 хв. 25 сек.



З люб'язного дозволу лікаря M Basso, Італія

Реставрації жувальних зубів у декілька кроків - ізоляція абсолютно непотрібна

Вологостійкість EQUIA Forte HT забезпечує легкість реставрування глибоких порожнин, навіть коли немає можливості застосувати кофердам. Використання секційної матриці сприятиме довговічності реставрацій.



З люб'язного дозволу лікаря Z Bilge Kütük, Турція

Реставрації чутливих, гіпомінералізованих зубів ваших молодих пацієнтів

Хімічна адгезія матеріалу (навіть до необробленого дентину) пропонує надійніше рішення у ситуації, коли використання адгезиву є неможливим. Матеріал можна легко вносити після часткового видалення уражених карієсом тканин, що робить легшим використання матеріалу для пацієнтів із гіперчутливістю.



З люб'язного дозволу лікаря P. Rouas, Франція

EQUIA Forte HT від GC

Міцність у поєднанні з красою



**Справжня техніка
внесення однією порцією**



Вологостійкість



**Розширенні
показання**



**Перевірена
довговічність**

EQUIA Forte HT								
Intro Pack	20 капсул (0.40 г) + 20 унідоз EQUIA Forte Coat 0.1 мл							
Артикул	901554	901555			901556			
Відтінок	A2	A3			B2			
Promo Pack	100 капсул (0.40 г) + 1 пляшечка EQUIA Forte Coat 4 мл							
Артикул	901557	901558	901559	901560				
Відтінок	A2	A2-A3	A3	A3-B2				
Clinic Pack	200 капсул (0.40 г) + 1 пляшечка EQUIA Forte Coat 4 мл							
Артикул	901561	901562			901563			
Відтінок	A2	A3			B2			
Assorted Pack	50 капсул							
Артикул	901572							
Відтінок	10 капсул кожного відтінка A2, A3, A3.5, B1, B3							
Капсули окремо	50 капсул							
Артикул	901564	901565	901566	901567	901568	901569	901570	901571
Відтінок	A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3	C4

Coat Refill Pack EQUIA Forte Coat	
901573	GC EQUIA Forte Coat FlipCap, 4 мл пляшечка
900960	GC EQUIA Forte Coat, 50 унідоз

EQUIA та EQUIA Forte є торговими марками GC.
ChemFil Rock, Ketac Universal та Riva Self Cure не є торговими марками GC.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська 32, оф. 11
Тел.: (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел./Факс: (044) 503-11-11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

Міцність у поєднанні
з красою



EQUIA Forte™ HT
від GC

СклоГібридна
реставраційна система




EQUIA Forte HT від GC

Міцність у поєднанні з красою

Довговічні реставрації постійних зубів стали простішими

У 2007 році GC представили EQUIA - першу реставраційну склоіономерну систему, що може використовуватися для довговічних реставрацій навантажених порожнин II Класу. Ця реставраційна система поєднує **склоіономерний цемент високої в'язкості та унікальне захисне покриття**. З початку створення численні клінічні дослідження **демонструють** його **клінічну ефективність** та доводять задовільну довговічність до 8 років*.

*Gurgan та ін. 8-річна Клінічна Оцінка Склоіономерної Реставраційної Системи. J Dent Res. 2017; 96 Spec Issue B: # 0287CED.

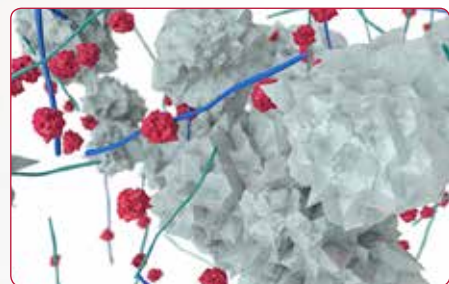

EQUIA Forte HT передова склогібридна технологія

- Поверхнева обробка FAS фторалюмосилікатне скло
- Високореакційна поверхнева обробка дрібного FAS
- Високомолекулярна поліакрилова кислота
- Поліакрилова кислота

Виведення СклоГібриду на новий рівень

У склогібридній технології застосована суміш часток різних розмірів. Завдяки ефективному контролю розподілення розмірів часток та їх взаємодії в **EQUIA Forte HT** значно покращені моделювальні властивості та міцність. Результат? **Зміцнений та нелипкий** матеріал для **внесення однією порцією** для реставрації навіть навантажених порожнин II Класу.

*Зверніться до технічного керівництва, щодо рекомендацій з препарування порожнини.

Підвищена прозорість

З покращенням СклоГібридної технології, **EQUIA Forte HT** має чудово **адаповану прозорість** для кращого вигляду жувальних реставрацій. **Індекс заломлення світла** часток наповнювачів було адаптовано до матриці. І як результат, фінальна реставрація виглядає **природніше та естетичніше**.




EQUIA Forte Fil
Відтінок A2



EQUIA Forte HT Fil
Відтінок A2

Міцність

СклоГібридна система пропонує міцність найінноваційнішого скла, що поєднується зі зносостійкістю наповненого покриття. **Унікальна синергія покриття та реставраційного матеріалу** покращує довговічність та зносостійкість реставрації.

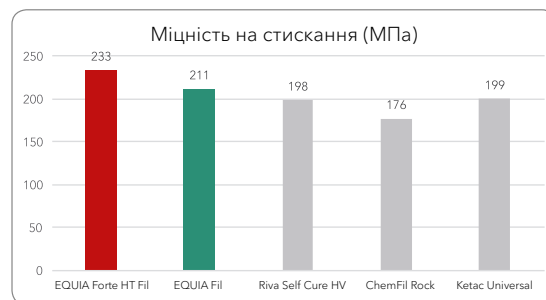

Source: GC R&D, Japan, 2018. Дані по файлу



Основні показання для EQUIA Forte HT

Надзвичайно проста процедура

EQUIA Forte HT створена для того, щоб ваша щоденна реставраційна практика стала максимально легкою та ефективною. Реставрацію можна виконати у лічені хвилини. Це матеріал, який легше використовувати, проте довговічність реставрації зберігається.



Внесення
Техніка внесення однією порцією. Зручна капсульна форма випуску

Надання форми
Подовжений робочий час. Легкість контурування. Не липкий

Фінішна обробка
Твердіння після 2'30"

Покриття
Блискач поверхня без полірування. Ідеальне запечаткування та зносостійкість

Полімеризація світлом
Реставрація завершена через 3'25"

Після польового тесту проведеного по всій Європі, 98% користувачів були задоволені моделюванням EQUIA Forte HT**

**Дані по файлу



EQUIA Forte HT призначена для навантажених порожнин II Класу*.

Система, що базується на Простоті, Стабільності та Впевненості!

Відмінна біосумісність

EQUIA Forte HT можна використовувати при частковому видаленні уражених карієсом тканин, щоб застосувати **мінімально інвазивне препарування (MI)**. Оскільки травильний гель не потрібен, адже система спирається на хімічну адгезію, ризик постопераційною чутливості зменшується - це також доводить **безпечність цієї методики лікування**.



З люб'язного дозволу лікаря Z Bilge Kütük, Турція

EQUIA Forte HT - ваш найкращий партнер для реставрацій жувальних зубів.

Довготривалий перевірений результат

EQUIA Forte HT - це надійна система, що базується на **12-річному клінічному досвіді EQUIA**. Довговічність жувальних EQUIA-реставрацій була доведена у багатьох незалежних, довготривалих клінічних дослідженнях¹⁻⁵. Базуючись на відмінних перших результатах, ми очікуємо, що склогібридні системи EQUIA Forte та EQUIA Forte HT матимуть такий самий чудовий ефект⁶.

- Gurgan *et al.* 8-Year Clinical Evaluation of a Glass Ionomer Restorative System. J Dent Res. 2017;96 Spec Issue B: #0287CED.
- Gurgan *et al.* Clinical performance of a glass ionomer restorative system: a 6-year evaluation. Clin Oral Investig. 2017;21(7):2335-2343. **EQUIA проти Композиту**
- Türkün *et al.* A Prospective Six-Year Clinical Study Evaluating Reinforced Glass Ionomer Cements with Resin Coating on Posterior Teeth: Quo Vadis? Oper Dent. 2016;41(6):587-598. **EQUIA проти Riva SC**
- Basso *et al.* 7 Years, Multicentre, Clinical Evaluation on 154 Permanent Restorations Made With a Glassionomer-based Restorative System. J Dent Res. 2016;95 Spec Issue B: #0446.
- Klinke T. *et al.* Clinical performance during 48 months of two current glass ionomer restorative systems with coatings: a randomized clinical trial in the field. Trials. 2016;17(1):239. doi: 10.1186/s13063-016-1339-8. **EQUIA проти Склоіономерного цементу зі звичайним покриттям**
- Gurgan *et al.* 12-month Clinical-performance of a Glass-hybrid-restorative in Non-caries-cervical-lesions of Patients With Bruxism J Dent Res. 2018;97 Spec Issue A: #0235. **EQUIA Forte проти композиту**