

Sure Dent

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



Sure-Seal Root™

Sure-Seal Root™ — силер для постійного пломбування корневих каналів із використанням гутаперчевих штифтів.

Sure-Seal Root™ — зручний готовий до застосування матеріал рідкої консистенції на основі силікату кальцію.

Sure-Seal Root™ — не зменшується в об'ємі під час твердіння та демонструє чудові фізичні властивості.



Переваги:

Біосумісність

Хімічний зв'язок з дентином (цементом кореня)

Сприяння регенерації кістки

Має зручний робочий час та час затвердіння

Високі антибактеріальні властивості (>pH 12)

Бере участь у формуванні гідроксиапатиту

Висока рентгеноконтрастність

Не потребує змішування: готова паста у шприці

Гідрофільність

Клінічні випадки:



Упаковка:

шприц 2 г, 20 насадок



Sure-Seal Root™ PT



Sure-Seal Root™ PT —

готова до використання біокерамічна паста для перекриття пульпи, постійного відновлення цілісності кореневого каналу, заповнення верхівки кореня.

Sure-Seal Root™ PT —

основні компоненти: суміш алюмосилікату кальцію та вода. Не потребує замішування з водою.

Sure-Seal Root™ PT — має густу консистенцію (putty), тому легше вноситься та пакується при закритті перфорацій.

Показання:

Покриття пульпи

Відновлення перфорованого кореня

Відновлення резорбованого кореня

Заповнення верхівки кореня

Апексифікація

Товар на сайті:




Упаковка:

1 канюля 0.25 г

10 канюль по 0.25 г

Sure-paste®

Sure-paste® — водорозчинна паста на основі гідроксиду кальцію для тимчасового пломбування корневих каналів.

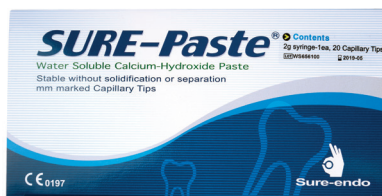

Переваги:

Стабільна консистенція без загустіння чи розділення на фракції

Висока текучість

Добра рентгеноконтрастність

Пролонгований антибактеріальний та бактерицидний ефект

Гігієнічна упаковка

Гнучкі насадки зручні для роботи навіть у викривлених каналах

Легкість очищення та видалення з каналу завдяки розчинності у воді

Упаковка:

2 шприци по 2 г, 20 насадок

1 шприц 2 г, 10 насадок

Sure-prep®

Sure-prep® — гель на основі ЕДТА та 10% пероксиду карбаміду у поліпропіленгліколевих та поліетиленгліколевих співполімерах для хімічного розширення корневих каналів.



Пероксид карбаміду (входить до складу препарату) реагує з гіпохлоритом натрію, що сприяє піноутворенню та видаленню залишків пульпової тканини та дентинних ошурок з каналу.

Переваги

Ефективне очищення кореневого каналу

Полегшення інструментальної обробки кореневого каналу

Контрастний синій колір

Упаковка:

3 шприци по 6 г, 20 насадок

1 шприц 6 г, 6 насадок

Гутаперчеві штифти



■ Стандартні розміри

Конусність .02

Розміри: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асорті (15-40, 45-80)

Упаковка: 120 шт.

■ Нестандартні розміри, для:

PROFILE®, конусність .04, .06

Розміри: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, асорті (20-45)

Упаковка: 60 шт.

PROTAPER®

Розміри: F1, F2, F3, F4, F5, асорті (F1-F2-F3)

Упаковка: 60 шт.

PROTAPER® NEXT

Розміри: X2, X3, X4, X5, асорті (X2-X5)

Упаковка: 60 шт.

■ Спеціально для методики гарячої конденсації гутаперчі

Soft (150°C), Regular (200°C), Hard (230°C)

Упаковка: 100 шт.

Паперові штифти

■ Стандартні розміри

Конусність .02

Розміри: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, асорті (15-40, 45-80)

Упаковка: 200 шт.

■ Нестандартні розміри, для:

PROFILE®, конусність .04, .06

Розміри: 15, 20, 25, 30, 35, 40, асорті (20-45)

Упаковка: 100 шт.

PROTAPER®

Розміри: F1, F2, F3, асорті (F1-F2-F3)

Упаковка: 100 шт.



Sure-Cord®

Sure-cord® — в'язана ретракційна нитка зі 100% бавовни, без просочення.



Переваги

В'язані петлі, які переплітаються між собою, здатні поглинати значно більшу кількість гемостатичного розчину, а також є добрим засобом для доставки у робочу зону препаратів у формі гелю

Під час препарування в'язана нитка не намотується на алмазний бор

Ідеально підходить для ретракції ясенних тканин та легко пакується у зубоясенну борозну



Обрізчик нитки

Легкий та зручний спосіб відрізання нитки

Лезо з нержавіючої сталі знаходиться усередині ковпачка

Запобігає перехресному інфікуванню

Відрізає нитку автоматично під час закривання контейнера ковпачком

Утримує кінець нитки у ковпачку, тому вона не падає всередину контейнера після відрізання

6 розмірів: 000, 00, 0, 1, 2, 3

Маркування кольором дозволяє швидко вибрати необхідний розмір.

Упаковка:

нитка 254 см



Sure-Cord® Plus



Sure-cord® Plus — Ретракція & Гемостаз.
Оптимальна нитка для точних відбитків.

Зв'язана з мікролокон

Швидка ретракція за 1-2 хвилини

Видатна поглинальна здатність

Стабільна структура: легке розміщення та пакування

Немає розпушування (немає ворсу) на поверхні нитки

Просочена AICI

Ніжна в'яжуча дія і гемостаз

Безпечність:

- Немає кардіо-судинних проблем (не містить епінефрин)
- Немає почорніння ясен


Зручний обрізчик

Відрізає нитку одним рухом кришки

Керамічне лезо

Маркування довжини (2 – 3 – 4 – 5 см) на пляшечці

6 розмірів: 000.0, 000, 00, 0, 1, 2

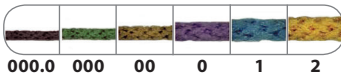

Упаковка:

нитка 254 см



5 см
маркування
довжини

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів,
лікарів та інших професійних медичних працівників.



КРІСТАР
Група компаній

04071, м. Київ,
вул. Межигірська 50, оф. 1
Тел/факс: (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

