



901595	Temp PRINT Light, 500 г
901596	Temp PRINT Medium, 500 г

008408	OPTIGLAZE color, Набір
008424	OPTIGLAZE color clear, 5 мл
008425	OPTIGLAZE color clear HV, 5 мл



009137	Labolight DUO
--------	---------------

004253	GC Fuji TEMP LT 2 x 13.3 г (7.2 мл) Paste Pak картриджі
001573	Paste Pak Диспенсер



Перевірте сумісність із вашим принтером

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
<https://europe.gc.dental/uk-UA>

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

GC

z L LF EN 8 85 09/20

Будуємо МОСТИ у майбутнє


Temp PRINT™ від GC

Композит світлової
полімеризації для
3-D друку тимчасових
коронок та мостів

GC


Проектуйте та створюйте з GC Temp PRINT

Складні конструкції легше друкувати та не перевитрачати матеріал. GC Temp PRINT – **біосумісний** матеріал для тимчасових коронок і мостів, **що не містить метилметакрилату (ММА)**. Розроблений для використання у DLP 3D-принтерах, має виняткові механічні властивості та зберігає стабільність із часом.

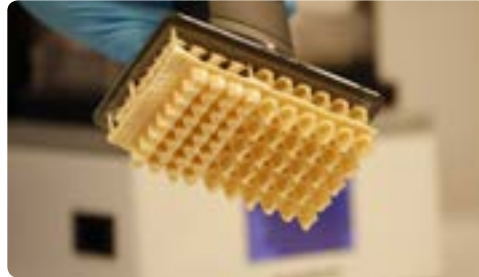


Унікальна технологія наповнювача


Гомогенне розподілення кварцевих часток GC Temp PRINT можна побачити на SEM-фотографіях. GC Temp PRINT – висконаповнений у порівнянні з іншими матеріалами для DLP-систем, що забезпечує надійність для довготривалих тимчасових реставрацій.

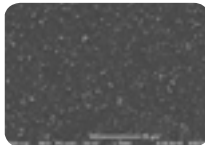

GC Temp PRINT
наповнення: 20% wt.

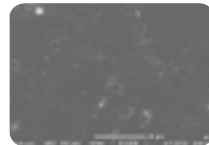


Продукт: А
наповнення: 0.4% wt.

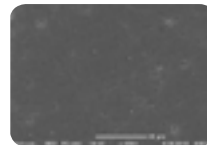

Продукт В
наповнення: 0.8% wt.

Показання	Довготривалі тимчасові коронки, мости, вкладки, накладки та вініри
Біосумісність	IIa Клас
Міцність на вигин	> 90 МПа
Густина при 20°C	1.1-1.3 г/см³
В'язкість	500-2000сР
Сорбція	< 40 мкм/мм³
Розчинність	< 7.5 мкм/мм³
Відтінок	Light & Medium
Довжина хвилі	385-405 нм
Товщина шару	50 мкм
Розфасовка	500 мл, пляшка

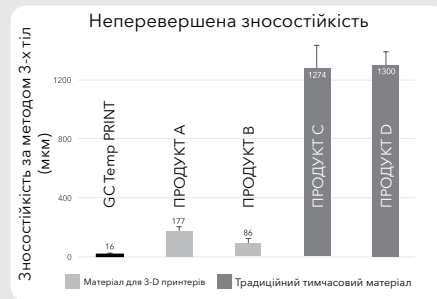

Додайте кольору та блиску вашим тимчасовим роботам із OPTIGLAZE color

GC пропонує вам просте рішення для додавання блиску та характеристики ваших надрукованих на 3D-принтерах конструкцій з OPTIGLAZE color. Фотополімерне покриття готове до використання, легке у моделюванні, зберігає цінний час на стадії полірування. Популярна технологія нанопокриття надає високу зносостійкість та довговічний блиск усім вашим надрукованим тимчасовим коронкам та мостам.



Ви можете обирати зі широкого спектру кольорів, що забезпечать вам найдивовижніші естетичні результати!

Виняткова естетика

Найдетальнішу анатомію можна створити дуже простим способом! Невеликі коригування або адаптації в оклюзії легко зробити шляхом шліфування, Unifast III або композиту з сімейства G-aenial.



Anthony Mak,
Австралія



Stephan Lusty,
Велика Британія

Динамічний контроль реології (DCR)

Завдяки DCR-технології, струшування пляшки вручну достатньо для отримання однорідної дисперсії. Антиседиментаційні добавки утворюють оболонку навколо пігментів і наповнювачів, перешкоджаючи їх осадженню. Таким чином, суміш залишається стабільною, з високою точністю і відтворюваністю з плином часу.


Кварцевий наповнювач

Силанізація поверхні

Смола

Пігменти

Антиседиментаційні добавки

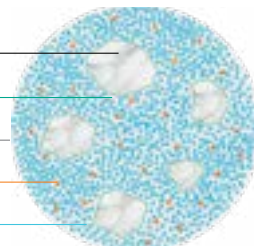

Постобробка та стерилізація

Labolight DUO може ефективно полімеризувати всі матеріали світлової полімеризації. 12 синіх та 3 фіолетові світлодіоди забезпечують оптимальне твердіння, в той час як висока потужність зменшує кількість циклів опромінювання. Це ідеальний партнер для **постполімеризації** конструкцій із GC Temp PRINT та полімеризації покриття OPTIGLAZE color.

